

4.0

CREDITO D'IMPOSTA
20%

SI STE MA

X



OFFERTA
CREMA
Lenisce e
nutre le
tue mani



FARMACIA
MODERNA



LA TECNOMEDICA®

PRESSY® STATION® PESOFARMA®

INNOVAZIONI IN FARMACIA DAL 1958

4.0

TRANSIZIONE 4.0

CREDITO
DIMPOSTA
20%

Le apparecchiature interconnesse al sistema della farmacia possono beneficiare del credito d'imposta detraendolo nel modello F24 dagli importi dovuti per imposte, contributi ecc.

La detrazione va effettuata in tre rate di cui la prima dopo che è avvenuta l'interconnessione e le due seguenti a distanza di un anno l'una dall'altra.

ANCHE IN LEASING

**TUTTI I PRODOTTI* SONO ACQUISTABILI
TRAMITE NOLEGGIO OPERATIVO O FINANZIARIO****

** con valore maggiore di 2.000 euro (IVA esclusa)*

*** salvo approvazione di finanziaria e concessionaria*

IL MISURATORE DELLA PRESSIONE

PRESSY X
MADE IN ITALY



PRESSY X il misuratore più preciso mai realizzato!

Con l'ausilio dell'IA abbiamo creato un misuratore che realizza la sinergia delle due tecniche di misurazione universalmente impiegate: tecnica auscultatoria e tecnica oscillometrica.

Nella stessa misurazione due catene indipendenti tra di loro determinano due serie di risultati che vengono confrontati reciprocamente mediante un algoritmo che utilizza criteri di comparazione basati sull'analisi dinamica degli impulsi rilevati per determinare il valore pressorio più preciso.

PRESSY X il misuratore automatico più ergonomico mai realizzato!

Nessun cavo e nessun tubo! Il dispositivo si adatta alla postura del soggetto senza mai costringerlo a posizioni obbligate. In tal modo si consegue una posizione naturale che favorisce il rilassamento richiesto per una misurazione ottimale.

PRESSY X il più piccolo misuratore completamente automatico mai realizzato!

A differenza della totalità dei misuratori elettronici che hanno la chiusura della fascia del bracciale manuale con un velcro, Pressy X ha una fascia motorizzata che regola automaticamente la stretta in modo ottimale evitando applicazioni errate.

con

PRESSYX[®]
MADE IN ITALY


il sistema **BREVETTATO**
per la **MISURAZIONE BILATERALE**

il nuovo servizio della farmacia:

IL TEST DELLA CIRCOLAZIONE

può dirci se le nostre arterie sono sane o se corriamo il rischio di sviluppare

la malattia vascolare periferica, dovuta a un restringimento o a un irrigidimento dei vasi sanguigni.

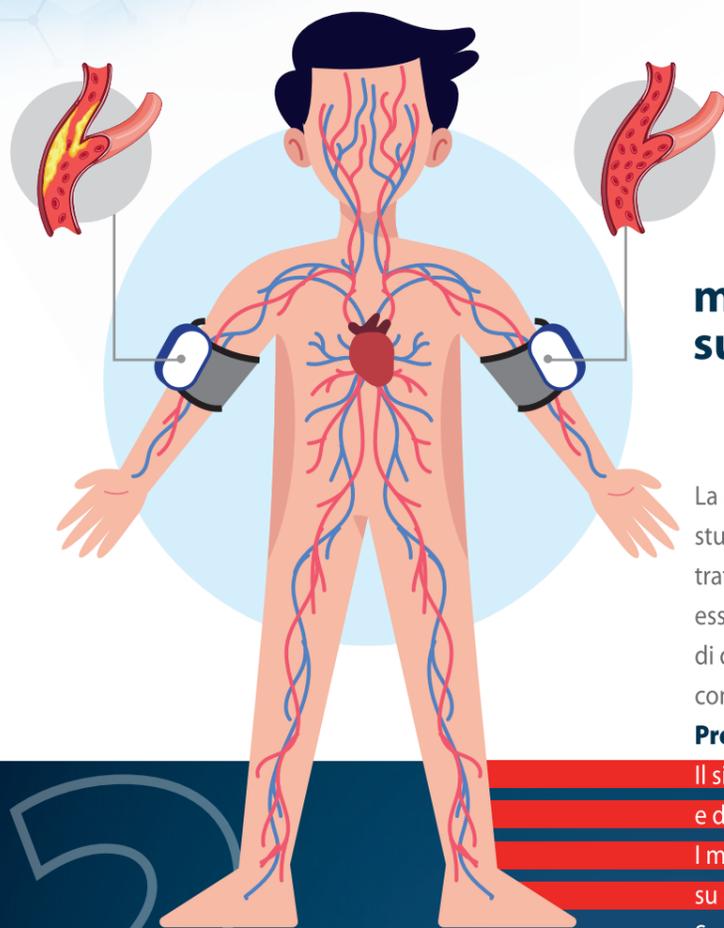

misurare i valori su entrambe le braccia

La misura simultanea bilaterale è molto importante: recenti studi evidenziano che un divario >10 mmHg è stato riscontrato sul 4% della popolazione*. Si tratta di un esame che per essere fatto a livello ambulatoriale richiederebbe l'intervento di due operatori addestrati per effettuare la misurazione contemporaneamente. Da qui il vantaggio che il sistema **Pressy X** offre con una soluzione comoda e a portata di tutti.

Il sistema è composto da due misuratori di pressione e da una stazione, tutti connessi tramite bluetooth.

I misuratori eseguono la rilevazione della pressione arteriosa su entrambe le braccia simultaneamente.

Secondo le indicazioni della dottrina medica** nel caso in cui le due massime differiscono di oltre 10 mmHg è consigliabile accertare possibili problemi dell'apparato circolatorio.

**



PRESSYX[®]
MADE IN ITALY

* UN DISLIVELLO TRA LE DUE MISURAZIONI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA È INDICE DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE. UNA RICERCA ABBASSA LO SCARTO TRA I VALORI ACCETTABILI

La pressione del sangue va misurata su ambedue le braccia. Perché l'eventuale differenza dei valori - segnalata dallo sfigmomanometro - può avere un importante significato. Se supera un certo livello, il rischio di avere un ictus o un infarto, è più elevato. Questi principi sono presenti nelle attuali linee guida. Ma - come si usa dire - alzi la mano chi si è visto provare la pressione nelle due braccia durante una visita medica. È un evento piuttosto raro. Complice anche la fretta per i pazienti in attesa. «Ma un piccolo lasso di tempo in più può salvare delle vite», osservano i ricercatori dell'Università di Exeter (Gran Bretagna), che hanno condotto una vasta indagine al proposito. La loro è stata una metanalisi, cioè una rivisitazione di studi precedenti, che ha messo insieme i dati di 24 ricerche globali condotte su adulti di Europa, Stati Uniti, Africa e Asia dei quali si conoscevano i valori della pressione nelle due braccia. Alla fine si è trattato di 54 mila persone. E il risultato finale è stato pubblicato sul giornale Hypertension.

I RISCHI NEL GIRO DI DIECI ANNI

L'indagine, rafforzando la raccomandazione a prendere la pressione nelle due braccia, arriva a stabilire un tetto più basso alle differenze ammissibili tra i due valori. Per avvalorare i propri dati, i ricercatori hanno contabilizzato il numero di morti, attacchi cardiaci, ictus verificatisi tra i soggetti sotto esame nel giro di dieci anni. I due valori della pressione da confrontare sono quelli della pressione sistolica (o massima), quella che se è oltre un certo livello dà luogo all'ipertensione. Ne soffre un terzo della popolazione adulta e da sola rappresenta la principale causa di infarti, ictus, morte prematura. Ora, perché è importante registrare la eventuale differenza tra la pressione sistolica di un braccio e dell'altro? Perché una significativa diversità potrebbe indicare un restringimento o un irrigidimento delle arterie che influiscono sul flusso del sangue. Questi cambiamenti nei vasi sanguigni rappresentano un aumentato rischio di disturbi cardiovascolari, anche gravi. I ricercatori hanno concluso che ogni millimetro di mercurio (mmHg) in più trovato nel salto tra i due valori di pressione innalza dell'1 per cento (in dieci anni) il rischio di sviluppare un'angina, un infarto o un ictus.

DIVARIO MASSIMO DI 10 MILLIMETRI DI MERCURIO

Rispetto all'attuale tetto indicato come «pericoloso» dalle attuali linee guida, gli scienziati di Exeter propongono il limite di 10 mmHg come differenza tra le due braccia, in quanto già indicativa di un maggiore rischio cardiovascolare. Il che significa che molte più persone andrebbero prese in carico per una terapia. Si pensi che una disparità più alta di 10 mmHg nella pressione delle due braccia si trova nell'11 per cento delle persone con ipertensione e nel 4 per cento della popolazione generale.

Fondazione Umberto Veronesi pubblicato il 14 - 01 - 2021

Check ritmo per la rilevazione di aritmie

Si tratta di una **funzione indipendente dalla misurazione pressoria**. Il sistema può registrare e stampare la pulsazione a pressione costante così da evidenziare eventuali anomalie del ritmo dovute a qualsiasi tipologia come ad esempio Fibrillazione atriale, Extrasistolia, ecc. ecc.

FARMACIA DR. ROSSI
Via Emilia, 1 20100 - Milano
tel. 02 012 345 67

TRACCIATO RITMO



22/03/2024 - 09:04:32

Memorizza le tue misurazioni per farle consultare dal tuo medico. Chiedi al Farmacista.

Tariffa di registrazione: 0.00euro

Esempio di ritmo regolare

FARMACIA DR. ROSSI
Via Emilia, 1 20100 - Milano
tel. 02 012 345 67

TRACCIATO RITMO



22/03/2024 - 09:04:32

Memorizza le tue misurazioni per farle consultare dal tuo medico. Chiedi al Farmacista.

Tariffa di registrazione: 0.00euro

Esempio di aritmia

Cloud

Tutte le misurazioni
sul **Cloud**




Un vantaggio per il tuo cliente che vedrà raccolte tutte le sue misurazioni senza limite di tempo e ovunque si trovi potrà consultarle.



dati consultabili sempre

STAZIONE	DATA	ORA	CENTURNO	BRACCIO	SISTOLICA	Diastolica	PULSAZIONI
356500001	22-02-2024	09:53	17	Destro	101	62	64
356500001	22-02-2024	15:08	17	Sinistro	111	70	63
356500001	24-02-2024	14:17	17	Sinistro	93	47	68
356500001	27-02-2024	10:18	17	Sinistro	121	70	62
356500001	22-01-2024	15:08	17	Sinistro	105	65	63
356500001	13-02-2024	16:55	17	Destro	115	78	68
356500001	10-02-2024	15:08	17	Destro	118	65	63
356500001	10-02-2024	09:53	17	Destro	95	62	65
356500001	08-02-2024	15:08	17	Sinistro	101	62	63
356500001	01-02-2024	09:53	17	Sinistro	105	70	64
356500001	22-02-2024	09:53	17	Sinistro	110	65	64
356500001	15-02-2024	15:08	17	Sinistro	120	75	63
356500001	02-02-2024	15:08	17	Sinistro	119	68	62
356500001	28-02-2024	15:08	17	Sinistro	111	70	60
356500001	14-02-2024	15:08	17	Sinistro	115	72	63
356500001	24-02-2024	15:08	17	Sinistro	99	62	63
356500001	03-02-2024	15:08	17	Sinistro	111	70	63
356500001	08-02-2024	15:08	17	Sinistro	115	68	63
356500001	10-02-2024	15:08	17	Sinistro	105	70	63
356500001	14-02-2024	15:08	17	Sinistro	102	72	63

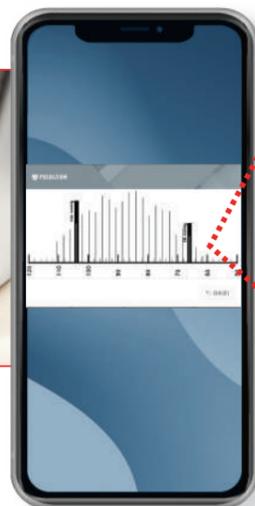

Un grande vantaggio per il suo medico che potrà accedere a tutti i dati quando gli sarà più comodo senza occupare la sala d'attesa con persone che vengono per aggiornarlo sulle loro misurazioni. Potrà quindi seguire meglio l'andamento della terapia e la compliance del paziente controllando l'effettuazione dei controlli pressori.

LA BILANCIA

**NON SOLO
UNA BELLISSIMA
BILANCIA!**

PESOFARMAX[®]

MADE IN ITALY

è multifunzione



PESOFARMA X
MADE IN ITALY

è multifunzione:

PESOFARMA X
MADE IN ITALY

Peso con precisione di 50 g
e Peso ideale



% **massa grassa**
% **acqua corporea**



Memorizzazione sul **CLOUD**

Collegamento con PRESSY X

per memorizzare
anche le misurazioni
pressorie



Autodiagnosi

e aggiornamenti da remoto

Scontrini

con intestazione personalizzabile

FARMACIA DR. ROSSI
Via Emilia, 1 20100 - Milano
tel. 02 012 345 67

KG 87,15Kg
High 179cm

PESO IDEALE:
70Kg

22/03/2024 - 09:04:32

Memorizza le tue misurazioni per farle consultare dal tuo medico. Chiedi al Farmacista.

Tariffa di registrazione: 0.00euro

FARMACIA DR. ROSSI
Via Emilia, 1 20100 - Milano
tel. 02 012 345 67

KG 87,15Kg
High 179cm

PERCENTUALE DI MASSA GRASSA:
21%

PERCENTUALE ACQUA:
64%

PESO IDEALE:
70Kg

22/03/2024 - 09:06:43

Comunicazione servizi e prodotti

con il pannello LED
programmabile



è dotata di un pannello LED che offre
la possibilità di **COMUNICARE**
in una veste originale

- ✓ **SERVIZI**
- ✓ **PRODOTTI**
- ✓ **INIZIATIVE PROMOZIONALI.**

Messaggi componibili con testi,
immagini e video, **utilizzando con un pc**
il programma in dotazione



MODULARITÀ DEL SISTEMA

X

Ti permette
di **decidere**
la tua **composizione**
che puoi realizzare
anche con successivi
inserimenti



A + B

Permette di fare la **misurazione**
ed **inviarla al Cloud**



A + A + B

In aggiunta a **A+B** permette di fare
il **TEST della CIRCOLAZIONE**
con la **misurazione bilaterale simultanea**

A + C

Permette di fare la **misurazione**
ed **inviarla al Cloud** insieme
ai **dati forniti dalla bilancia**



A + A + C

In aggiunta a **A+C** permette di fare
il **TEST della CIRCOLAZIONE**
con la **misurazione bilaterale simultanea**

OPTIONAL MOTODESK

Il **tavolo motorizzato con statimetro**
e **sedia abbinata** regola
automaticamente la sua altezza
in funzione della statura
della persona seduta per evitare
dislivelli tra il punto di misurazione
e il cuore.





INNOVAZIONI IN FARMACIA DAL 1958

LA TECNOMEDICA S.r.l. - 27058 Voghera (PV) Italy - Via Arcalini, 16
tel. +39 0383 365512 - fax +39 0383 365484 - vendite@latecnomedica.it

NUMERO VERDE
800-129667

 3791 333 042

www.latecnomedica.it